

MEDIT *i600*





Odontología Digital a Su Alcance

Experiencia de escaneo sorprendente

Ligero,

245g de peso con mejor agarre para mayor comodidad.

Fluido,

La velocidad mejorada y las imágenes escaneadas óptimas ofrecen una experiencia de escaneo más fluida. Suave como la seda, independientemente de las especificaciones del PC.

Vívido,

Transmite datos de escaneo vívidos a través del nuevo sistema óptico utilizado en el Medit i700.

El cerebro del i700 con un toque de color

Súper preciso, Súper ligero, Súper fluido.

El flujo de trabajo digital comienza con la captación de datos precisos. Medit i600 permite adquirir datos precisos sin esfuerzo.

*Alta precisión

Precisión de arco completo: $10.9 \mu\text{m} \pm 0.98$

*Adquiere datos precisos de escaneo desde el segmento anterior hasta la superficie oclusal

El Más Simple. El Más Fácil.

Tome el control total de su escaneo con un clic. ¡No hay necesidad de numerosos cables y hubs! Simplemente con Plug & Scan utilice un solo cable para la conexión directa con un PC.



Punta reversible de 180°



Botón de Inicio de Escaneo

Cable extraíble

Todo se Hace Fácil

Mediti600 se puede **conectar directamente al PC** con un solo cable, **eliminando** el número de cables en la clínica para una mayor comodidad.



Área de escaneo más grande (comparada al i500)

Un área de escaneo más grande (15x13mm) captura más con una pasada para una experiencia de escaneo más conveniente.

☒ i600
 ☐ i500



Facilitando el escaneo

Experimente la increíble adquisición de datos digitalizados con **Medit Scan for Clinics**. Nuestra tecnología de software de vanguardia hace que el escaneo sea más conveniente para usted.

¡Obtenga más de sus datos de escaneo con nuestras soluciones de software inteligente!

Smart Scan Guide

La guía de usuario reforzada proporciona ayuda para detectar anomalías durante el escaneo.

Smart Scan Filtering


El rendimiento mejorado de filtrado de I.A. facilita el proceso de escaneo al filtrar tejidos blandos como labios, mejillas y lengua.

Smart Color Filtering

Filtra automáticamente los colores registrados, como el color de los guantes médicos, durante el escaneo.

Smart Stitching

Escanee con su propia estrategia de escaneo. Los datos de escaneo fragmentados se alinean con el área común detectada automáticamente.

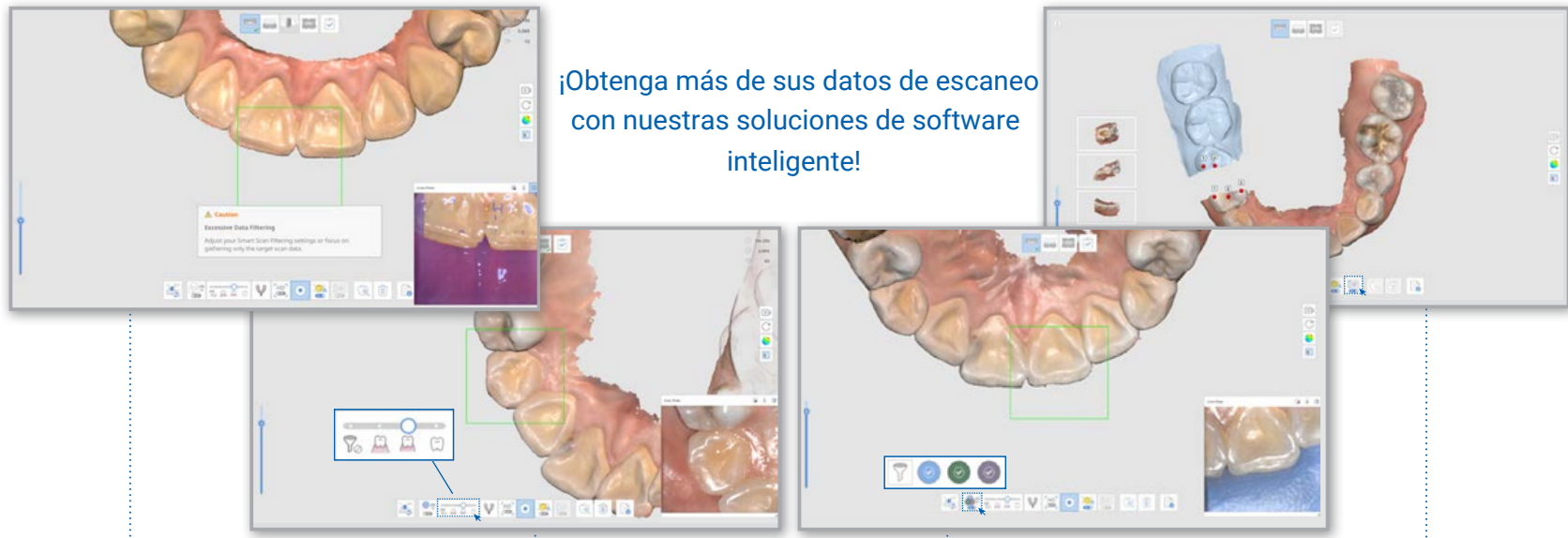



Para cada clínica

Si usted es un principiante de la odontología digital o en busca de conseguir un escáner adicional, el i600 será un socio perfecto para usted.

0091

Especificaciones

Categoría		Medit i600
Tecnología de escaneo	Fotogramas por segundo	Hasta 35 FPS Tecnología de vídeo 3D en movimiento I Captura a
	Tecnología de Imágenes	todo color 3D LED Antiempañamiento adaptativo 10.9µm ± 0.98
	Fuente de luz	248 x 44 x 47.4 mm
	Tecnología Antiempañamiento	245 g
Exactitud	Arco completo	22.2 x 15.9 mm
Pieza de mano	Dimensiones	15 x 13 mm
	Peso total	Autoclave 100 veces
Punta	Tamaño de Punta	121°C 30 minutos
	Área de Escaneo	134°C 4 minutos (Tipo Pre-Vacío)
		135°C 10 minutos (Tipo Gravedad)
	Autoclavable	Sí
		No
Modo especial		No
	Punta Reversible	USB 3.1 Gen1
	Modo de control remoto	
	Desinfección UV-C	
Conectividad		

- El rendimiento puede variar dependiendo de las especificaciones del PC
- Prueba de precisión del escáner i600 por Medit R&D
- La punta de 150 ciclos de autoclave se vende por separado.



Por favor, escanee el código QR para conocer los requisitos actualizados del sistema. >>

Acerca de Nosotros

Meditseespecializaenmedidas 3Dysoluciones CAD/CAM para clínicas y laboratorios dentales, incluyendoescáneresintraorales, basadosensu propia tecnología patentada de última generación. También desarrollamos soluciones de plataforma para odontología digital, apoyando flujos de trabajo colaborativos. Además, la línea Solutionix proporciona escáneres 3D y software para el mercado industrial. Nuestro objetivo es proporcionar tecnología innovadora y productos de la más alta calidad para garantizar el crecimiento mutuo de todos los socios.

Nuestra comunidad de Medit

Retroalimentacióncontinua, sugerencias de nuevos flujosdetrabajo y discusión activa. Desde debates acalorados hasta charlas divertidas, la comunidad de Medit siempre es entretenida con nuestros clientes. Colegas de todo el mundo se apoyan y ayudan activamente entre sí, y dan la bienvenida de forma sincera a colegas que se adentran al mundo de la odontología digital.

¡Escanee el código QR para unirse!

Medit y su comunidad le desean suerte en su nuevo viaje a la odontología digital.



Grupo de usuarios



Medit Academy



Centro de ayuda

BIOMEX

DISTRIBUIDOR EN TECNOLOGIA DENTAL

Octavio Olvera

CEO

📞 715111605

✉ octavio@biomexdental.com

📍 Av. Paseo Monte Miranda 17 Int
501 A, El Marques Qro. 76240

🌐 www.biomexdental.com



www.medit.com

Español